



- 10 cm x 10 m
- Super fino e Transparente
- Cadastro Anvisa n °: 80003300030
- Validade: 05 anos



**CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO**

Curativo Filme Transparente Rolo MTEC consiste em um filme de poliuretano não estéril, coberto por um adesivo hipoalergênico transparente. Pode ser usado na prevenção de infecções e proteção de tatuagens recentes. O produto é permeável a vapores, permitindo trocas gasosas e é impermeável a água e bactérias, atuando como barreira de proteção para a pele.

- Super fino e transparente;
- Fixação de Curativos Primários ou de baixa aderência;
- Fixação de cateteres e drenos;
- Fixação de Bolsas de perna e dispositivos de estoma;
- Reduz riscos de infecção, pois o filme de poliuretano é à prova d'água, à prova de bactérias e à prova de vírus;
- Transparente: possibilita a visualização do local da punção do IV;
- Curativo respirável, evitando a maceração da pele;
- Adesivo sensível à pressão hipoalergênico, com boas propriedades de adesão e não deixa resíduos na remoção;
- O curativo possui sistema de aplicação estilo moldura para facilitar o manuseio;
- Macio e adaptável.

**COMPOSIÇÃO**

Composto por uma película de poliuretano (PU) transparente com uma camada adesiva acrílica hipoalergênica, protegido por um papel siliconizado. Possui um papel na parte superior que permite a fácil aplicação do filme transparente. Isento de látex.

**INDICAÇÃO**

Fixação e cobertura de curativos primários; Cobertura de suturas; Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna; Proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana); Cobertura protetora da pele; Proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

**PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E MODO DE USO**


Não reutilize o curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO**

Manter em local seco, longe da luz solar direta e recomenda-se manter em locais com limite de temperatura de 0 - 40 ° C. Produto Estéril por Óxido de etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. Cadastro Anvisa n °: 80003300030. Validade: 05 anos.

**INSTRUÇÕES DE USO**

1) A pele deve estar limpa e seca; 2) Cortar o Filme Transparente no tamanho desejado; 3) Destacar uma das laterais do papel protetor do adesivo e aplicar sobre o local/pele; 4) Remover a outra lateral do papel de proteção do adesivo e posicionar sobre o local/pele; 5) Pressionar gentilmente as bordas para fixação e a parte central, massageando sobre o papel superior (quadriculado); 6) Remova o papel superior.

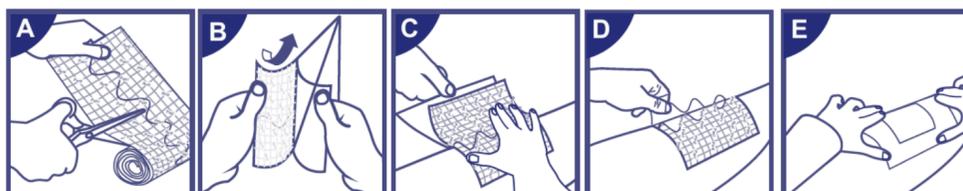

**APRESENTAÇÕES / EMBALAGEM**

O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	REGISTRO ANVISA	EAN
PA.1380	Curativo de PU em Rolo 10cm x 10m	Caixa com 36 un	80003300030	7896544902725
PA.1415	Curativo de PU em Rolo 10cm x 10m	Caixa com 1 un	80003300030	7896544902725

